

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ
WYRÓB PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

GLUCOSITE GEL

Żel do kieszonek dziąsłowych



SKŁAD: diglukonian chlorheksydyny , nadtlenek wodoru.

PRZEZNACZENIE

Wyrób *GLUCOSITE GEL* przeznaczony jest do stosowania podczas zabiegów stomatologicznych, prowadzonych przez lekarza w celu przepłukiwania kieszonek dziąsłowych i innych, trudno dostępnych do oczyszczania obszarów błony śluzowej jamy ustnej.

SPOSÓB UŻYCIA

Za pomocą dołączonego aplikatora umieścić żel w kieszonce dziąsłowej, wprowadzić preparat do kieszonki przesuwając aplikator wzdłuż linii dziąsła. Po zakończonej aplikacji zalecić pacjentowi przepłukanie jamy ustnej czystą wodą.

W razie potrzeby zabieg można powtórzyć po ok 7 dniach.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki preparatu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Wyrób ma działanie drażniące na oczy. W razie kontaktu natychmiast spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

W razie spożycia wypić dużą ilość wody, nie zmuszać do wymiotów. Skontaktować się z lekarzem.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim.

Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamykania po każdorazowym użyciu.


POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIAM I PO WYROBIE

Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub zwrócić do wytwórcy.

OPAKOWANIE

Strzykawka zawierająca 2 ml wyrobu, aplikatory jednorazowe.

Butelka zawierająca 50 ml wyrobu, adapter z zakrętką, dozownik, aplikatory jednorazowe.

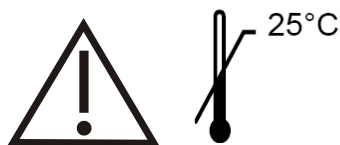

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85