

PL

# ALUSTAT

Płyn do tamowania krwawienia

**PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA**

**SKŁAD:** chlorek glinu 25%, woda o czystości farmakopealnej, mentol, substancje pomocnicze.

#### PRZEZNACZENIE

Wyrób ALUSTAT przeznaczony jest do stosowania w trakcie leczenia stomatologicznego w celu tamowania drobnych krwawień przydziąsłowych. Zawarty w wyrobie chlorek glinu działa obkurczająco na drobne naczynia krwionośne, w wyniku czego zmniejsza się obrzęk dziąsła i drobne krwawienia.

#### SPOSÓB UŻYCIA

Obrzmiałe lub zranione dziąsło delikatnie pocierać tamponem z waty nasączonym ALUSTATEM, następnie przepłukać czystą wodą. W razie potrzeby czynności powtórzyć.

#### PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki preparatu.

#### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Działa drażniąco na błony śluzowe jamy ustnej, skórę i oczy. W razie kontaktu natychmiast splukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. W razie spożycia nie zmuszać do wymiotów. Wypić dużą ilość wody. Skontaktować się z lekarzem. Podczas pracy z wyrobem należy stosować rękawiczki jednorazowe i okulary ochronne.

#### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze do 25 °C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim. Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamykania po każdorazowym użyciu.

#### POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYROBIE

Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub zwrócić do wytwórcy.

#### OPAKOWANIE

Buteleczka z zakraplaczem zawierająca 10 g preparatu.



EN

# ALUSTAT

Liquid for staunching the bleeding

**BEFORE USE PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY PRODUCT FOR DENTAL USE ONLY**

**COMPOSITION:** aluminum chloride 25%, water Ph.Eur., menthol, excipients.

#### INTENDED USE

Product ALUSTAT is intended for use during dental treatment to staunch slight gingival bleedings. Aluminum chloride contained in the product acts vasoconstrictively on tiny blood vessels, as a result the gingival swelling and slight bleedings decrease.

#### INSTRUCTIONS FOR USE

Swollen or injured gingiva rub gently with cotton wool tampon impregnated with ALUSTAT, next rinse it with clean water. Repeat action if necessary.

#### CONTRAINDICATIONS

Do not use the product for patients with hypersensitivity to the product's components.

#### PRECAUTIONS

It is irritating to the mucous membrane of the oral cavity, skin and eyes. In case of contact rinse immediately with copious amount of water and seek medical advice. In case of consumption do not extract emesis. Drink copious amount of water. Seek medical advice. Necessary use of disposal gloves and protective glasses while working with the product.

#### STORAGE

Store in original packaging at temperature below 25 °C. Store out of reach of children. Expiry date is placed on the main container. Once container is open, the expiry date doesn't change if it is securely closed after each use.

#### HANDLING THE PRODUCT CONTAINER

Empty containers should be disposed of responsibly or returned to the manufacturer.

#### PACKAGING

Bottle of 10 g with dropper.



ES

# ALUSTAT

Líquido para detener el sangrado

**ANTES DE USAR EL PRODUCTO PROCEDE LEER LAS PRESENTES INSTRUCCIONES EL PRODUCTO ESTÁ CONCEBIDO PARA SU USO ÚNICAMENTE POR ODONTÓLOGOS PROFESIONALES**

**COMPOSICIÓN:** 25% de cloruro de aluminio, agua de pureza conforme con los requisitos de la farmacopea, mentol, excipientes.

#### FINALIDAD

El producto ALUSTAT está concebido para su uso durante los tratamientos odontológicos para detener pequeños sangrados gingivales. El cloruro de aluminio contenido en el producto tiene un efecto vasoconstrictor en pequeños vasos sanguíneos, reduciendo el hinchazón de la encía y los sangrados menores.

#### INSTRUCCIONES DE USO

Frotar ligeramente la encía hinchada o herida con un rollo de algodón impregnado con ALUSTAT, luego enjuagar con agua limpia. En caso de necesidad, repetir los pasos mencionados.

#### CONTRAINDICACIONES

No emplear en pacientes con hipersensibilidad a los ingredientes del producto.

#### MEDIDAS DE SEGURIDAD

Irrita las mucosas bucales, la piel y los ojos. En caso de contacto, enjuagar los ojos con grandes cantidades de agua y procurar atención médica. En caso de consumo no inducir vómitos. Beber grandes cantidades de agua. Procurar atención médica. A la hora de trabajar con el producto deben emplearse guantes desechables y gafas de protección.

#### ALMACENAMIENTO

Guardar en el embalaje original a una temperatura inferior a 25 °C. Guardar fuera del alcance de los niños. La fecha de caducidad se encuentra en el envase directo del producto. Una vez abierto el embalaje, la fecha de caducidad no queda alterada, a condición de cerrarlo herméticamente tras cada uso del producto.

#### MANIPULACIÓN DE LOS ENVASES DEL PRODUCTO

Residuos de embalajes deben entregarse a la eliminación o devolverse al fabricante.

#### ENVASE

Botella con cuentagotas con 10 g del producto.



FR

# ALUSTAT

Liquide pour arrêter les hémorragies

**LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT UTILISATION PRODUIT POUR USAGE DENTAIRE SEULEMENT**

**COMPOSITION:** chlorure d'aluminium 25%, eau PH EUR. , menthol, excipients.

#### UTILISATION PREVUE

Le produit liquide ALUSTAT est utilisé pour arrêter de légers saignements pendant le traitement dentaire. Le chlorure d'aluminium agit comme vasoconstricteur sur les capillaires sanguins pour réduire le gonflement et le saignement.

#### MODE D'EMPLOI

Appliquer le produit directement sur la plaie avec une boulette de coton imbibée. Rincer ensuite à l'eau claire. Répétez l'action si nécessaire.

#### CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser le produit sur les patients présentant une hypersensibilité aux composants du produit.

#### PRÉCAUTIONS

Ce produit peut provoquer une irritation de la muqueuse de la cavité buccale, de la peau et des yeux. En cas d'irritation prolongée, consulter un médecin. Dans le cas d'une ingestion, ne pas vomir. Buvez beaucoup d'eau. Consulter un médecin. Toujours utiliser des gants jetables et des lunettes de protection en travailant avec ce produit.

#### STOCKAGE

Gardez dans l'emballage d'origine à une température inférieure à 25 °C. Tenir hors de portée des enfants. La date de péremption est placée sur le conteneur principal. Une fois le conteneur ouvert, la date d'expiration ne change pas si il est bien fermé après chaque utilisation.

#### RÉCYCLAGE DES CONTENEURS

Les récipients vides doivent être éliminés de façon responsable ou retournés au fabricant.

#### CONDITIONNEMENT

Bouteille de 10 g de préparation avec compte-gouttes.



DE

# ALUSTAT

Fluid zur Blutstillung

**BITTE LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG GRÜNDLICH DIE PACKUNGSBEILAGE DIESES PRODUKT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN GEBRAUCH IN ZAHNARZTPRAXEN BESTIMMT**

**INHALTSSTOFFE:** Aluminiumchlorid 25%, Wasser (Ph.Eur.), Menthol, Binde-mittel.

#### VERWENDUNGSZWECK

Das Produkt ALUSTAT ist zur Verwendung bei der zahnärztlichen Behandlung bestimmt, um geringfügige gingivale Blutungen zu stillen. Das im Produkt enthaltene Aluminiumchlorid wirkt abschwellend auf kleine Blutgefäße, wodurch die gingivale Schwellung und Sickerblutungen abnehmen.

#### GEBRAUCH

Über das geschwollene bzw. verletzte Zahnfleisch mit einem mit ALUSTAT getränkten Wattebausch sanft streichen und anschließend mit reinem Wasser spülen. Ggf. den Vorgang wiederholen.

#### GEGENANZEIGEN

Nicht bei Patienten mit etwaiger Überempfindlichkeit gegen die Bestandteile des Präparats anwenden.

#### SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Das Produkt wirkt sich reizend auf die Mundschleimhaut, die Haut und die Augen aus. Bei Kontakt sofort mit viel Wasser spülen und Arzt aufsuchen. Nach Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Viel Wasser trinken. Danach einen Arzt aufsuchen. Beim Einsatz des Produkts Einmalhandschuhe und Schutzbrille tragen.

#### AUFBEWAHRUNG

In der Originalverpackung bei Temperaturen unter 25 °C lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Das Haltbarkeitsdatum ist auf der direkten Verpackung angegeben. Die Haltbarkeitszeit ändert sich nicht nach dem Anbrechen der Verpackung, vorausgesetzt die Verpackung wird nach jedem Gebrauch wieder fest verschlossen.

#### ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

Leere Verpackungen sind sachgerecht zu entsorgen oder dem Hersteller zurückzuführen.

#### VERPACKUNG

Flasche mit Pipette à 10 g Präparat.



PL

Płyn do tamowania krwawienia

RU

Жидкость для остановки кровотечения

EN

Liquid for staunching the bleeding

IT

Soluzione per arrestare le emorragie

ES

Líquido para detener el sangrado

RO

Lichid hemostatic

FR

Liquide pour arrêter les hémorragies

HU

Vérzéscillapító folyadék

DE

Fluid zur Blutstillung

BG

Течност за спиране на кървенето

LT

Kraujavimą stabdantis skystis

Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2016/2

# ALUSTAT



CE 1011

**PPH CERKAMED** Wojciech Pawlowski  
37-450 Stalowa Wola, Poland  
ul. Kwiatkowskiego 1  
Tel./fax: + 48 15 842 35 85  
www.cerkamed.com

Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2016/2

Last update: 18.07.2016/2

Fecha de la última revisión: 18.07.2016/2


Date de dernière mise à jour: 18.07.2016/2

Letzte Aktualisierung: 18.07.2016/2

RU

## ALUSTAT

|  |
|--|
| <span></span>  |
| Жидкость для остановки кровотечения  |
| <b>ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРИВЕДЕННОЙ НИЖЕ ИНСТРУКЦИЕЙ</b>   |
| <b>ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВРАЧАМИ-СТОМАТОЛОГАМИ</b>  |
| <span></span>  |
| <b>СОСТАВ:</b> хлорид алюминия 25%, вода для фармацевтических целей, ментол, вспомогательные вещества.   |
| <b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>  |
| Продукт ALUSTAT предназначен для использования в процессе стоматологического лечения, в целях остановки мелких кровотечений. Содержащийся в продукте хлорид алюминия сужает мелкие кровеносные сосуды, в результате чего уменьшается отек десны и мелкие кровоизлияния.  |
| <b>СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ</b>   |
| Отек или травмированные десны аккуратно протрите ватным тампоном, смоченным препаратом ALUSTAT, затем смойте чистой водой. При необходимости действия повторите.   |
| <b>ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ</b>  |
| Не применять у пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам препарата.   |
| <b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>   |
| Может оказывать раздражающее действие на слизистую оболочку полости рта, кожу и глаза. При продолжительном раздражении обратитесь к врачу. При употреблении не вызывайте рвоту. Выпейте большое количество воды. Обратитесь к врачу. Во время работы с продуктом используйте одноразовые перчатки и защитные очки. |
| <b>ХРАНЕНИЕ</b>  |
| Хранить в оригинальной упаковке при температуре до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности указан на первичной упаковке. После вскрытия упаковки срок годности не изменяется, при условии плотного закрытия после каждого использования.   |
| <b>ОБРАЩЕНИЕ С УПАКОВКОЙ ИЗДЕЛИЯ</b>   |
| Использованные упаковки следует передать для утилизации или вернуть производителю.   |
| <b>УПАКОВКА</b>  |
| Бутылочка с пипеткой, содержащая 10 г препарата.   |

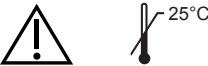

Дата последнего обновления: 18.07.2016/2

IT

## ALUSTAT

|   |
|---|
| <span></span>   |
| Soluzione per arrestare le emorragie  |
| <b>PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE ISTRUZIONE</b>  |
| <b>IL PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DAI DENTISTI</b>   |
| <span></span>   |
| <b>COMPOSIZIONE:</b> cloruro di alluminio 25%, acqua di purezza farmaceutica, mentolo, sostanze ausiliarie.   |
| <b>APPLICAZIONE</b>   |
| Il prodotto ALUSTAT è destinato all'utilizzo durante il trattamento dentistico per arrestare piccole emorragie delle gengive. Il cloruro di alluminio presente nel preparato agisce in modo da contrarre i piccoli vasi sanguigni riducendo il gonfiore della gengiva e diminuendo le emorragie.  |
| <b>MODALITÀ D'USO</b>   |
| Strofinare delicatamente la gengiva gonfia o ferita con un tampone di cotone imbevuto di ALUSTAT e sciacquare con acqua pulita. Se necessario ripetere l'operazione.  |
| <b>CONTROINDICAZIONI</b>  |
| Non usare il prodotto nei pazienti allergici agli ingredienti del preparato.  |
| <b>PRECAUZIONI</b>  |
| Ha un'azione irritante per le mucose della cavità orale, per gli occhi e la pelle. In caso di contatto, sciacquare immediatamente con molta acqua e contattare un medico. In caso di inghiottimento, non provocare il vomito. Bere molta acqua. Contattare un medico. Durante il lavoro con il preparato indossare i guanti monouso e gli occhiali di protezione. |
| <b>CONSERVAZIONE</b>  |
| Conservare nella confezione originale ad una temperatura non superiore ai 25 °C. Conservare lontano dalla portata dei bambini. La data di scadenza si trova sulla confezione diretta. Dopo l'apertura, il prodotto non perde la scadenza a condizione che venga chiuso ermeticamente dopo ogni utilizzo.  |
| <b>SMALTIMENTO DEL CONTENITORE</b>  |
| Le confezioni utilizzate devono essere affidate ad un'azienda di smaltimento o resituite al produttore.   |
| <b>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE</b>   |
| Bottiglietta con contagocce contenente 10 g di preparato.   |




Data ultimo aggiornamento: 18.07.2016/2

RO

## ALUSTAT

|   |
|---|
| <span></span>   |
| Lichid hemostatic   |
| <b>ÎNAINTE DE UTILIZARE VĂ RUGAM SĂ CITITI CU ATENȚIE URMĂTOARELE INSTRUCȚIUNI</b>  |
| <b>PRODUS DESTINAT UZULUI DENTAR</b>  |
| <span></span>   |
| <b>COMPOZITIE:</b> clorură de aluminiu 25%, apă pură, mentol, excipienți.   |
| <b>UTILIZARE</b>  |
| ALUSTAT lichid este folosit in timpul tratamentului dentar pentru hemoragiile gingivale ușoare. Clorura de aluminiu conținuta de produs acționează ca antiinflamator, hemostatic și vasoconstrictor pe vasele de sânge mici.  |
| <b>INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE</b>  |
| Tamponați zona inflamată sau cu sângerare cu un tampon imbibat in ALUSTAT, apoi clatiți cu apa. Repetați procedura daca este necesar.   |
| <b>CONTRAINDICATII</b>  |
| Nu utilizați produsul pentru pacienții cu hipersensibilitate la componentele acestuia.  |
| <b>PRECAUII</b>   |
| Este iritant pentru mucoasa cavitatii bucale, piele și ochi. În caz de contact clătiți imediat cu o cantitate mare de apă și solicitați sfatul medicului. În caz de inghitire, consumați o cantitate mare de apă. Cereți sfatul medicului. Este necesară folosirea echipamentului de protecție (ochelari, mănuși) în timp ce se lucrează cu produsul. |
| <b>DEPOZITARE</b>   |
| A se păstra în ambalajul original, la o temperatură sub 25 ° C. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Data de expirare este plasata pe recipientul principal. Odată ce recipientul este deschis, data de expirare nu se schimbă în cazul în care acesta este închis bine după fiecare utilizare.   |
| <b>MANIPULARE</b>   |
| Recipientele goale trebuie aruncate în mod responsabil.   |
| <b>AMBALAJUL</b>  |
| Sticlă de 10 g cu picurător.  |

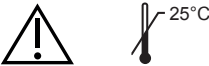


Data ultimei actualizări: 18.07.2016/2

HU

## ALUSTAT

|  |
|--|
| <span></span>  |
| Vérzéscillapító folyadék   |
| <b>HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT</b>   |
| <b>KIZÁRÓLAG FOGÁZATI CÉLŰ FELHASZNÁLÁSRA</b>  |
| <span></span>  |
| <b>ŐSSZETÉTEL:</b> 25%-os alumínium-klorid . víz (Ph.Eur.), mentol, töltőanyagok   |
| <b>INDIKÁCIÓK</b>  |
| Az ALUSTAT folyadékot fogászati alkalmazásra, szájnyálkahártyán való használatra tervezték. Segítségével csillapíthatók enyhe vérzések a kezelés alatt és után. Alumínium-klorid tartalma révén antiflogisztikus és vazokonstrukciós hatást fejt ki a vékony ereknek, ennek köszönhetően kiválóan csillapítja a duzzanatot és vérzést.   |
| <b>HASZNÁLATI UTASÍTÁS</b>   |
| Vatta tampon segítségével juttasson egy keveset az anyagból a vérző, vagy irritált fognyire, gyengéden masszírozza be a vattapamaccsal. Öblítse le a vérzéscsillapítás helyét tiszta vízzel. Ismételje meg e lépéseket, ha szükséges.  |
| <b>KONTRAINDIKÁCIÓK</b>  |
| Soha ne használja olyan betegnél, aki érzékeny a termék bármely komponensére.  |
| <b>ELŐVIGYÁZATOSÁGI RENDSZABÁLYOK</b>  |
| Bőrirritációt okozhat. Irritációt fejthet ki a szájnyálkahártyán. Ha ez bekövetkezik, azonnal mossa le bőséges vízzel! Szembe jutva irritáló hatású lehet. Ha ez mégis bekövetkezik, mossa le bőséges, langyos vízzel. Szem irritáció esetén forduljon azonnal szakorvoshoz! Lenyelni tilos, ám ha megtörténik, ne hánytasson. Itasson a beteggel bőséges vizet és forduljon szakorvoshoz! Használata során mindig viseljen eldobható védőkesztyűt és szemvédő szemüveget. |
| <b>TÁROLÁS</b>   |
| Érvedeti készelésében szobahőmérsékleten (max.25 °C) tárolható. Gyermekektől távol tartandó! A termék lejáratí ideje a csomagoláson olvasható. Felbontás után a termék lejáratí ideje nem változik, feltéve, ha biztonságosan visszazárja minden használat után.   |
| <b>AZ ELHASZNÁLT TERMÉK MEGSEMISÍTÉSE</b>  |
| Az elhasznált terméket, illetve a csomagolóanyagot juttassa vissza a gyártóhoz, vagy semmisítse meg a helyi hatóságok előírásának megfelelően (kémiai hulladék).   |
| <b>KISZERELÉS</b>  |
| 10 g csepegtetőс üvegcsében.   |

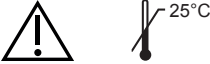


Utolsó frissítés dátuma: 18.07.2016/2

BG

## ALUSTAT

|   |
|---|
| <span></span>   |
| Течност за спиране на кървенето   |
| <b>ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА</b>   |
| <b>ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ САМО ОТ СТОМАТОЛОГ</b>  |
| <span></span>   |
| <b>СЪСТАВ:</b> Алюминиев хлорид, пречистена вода.   |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ</b>   |
| ALUSTAT е предназначен за ползване по време на стоматологично лечение за спиране лекото кървене от венците. Съдържащият се в продукта алуминиев хлорид свива тънките кръвоносни съдове, в резултат на което намалява оттока и кървенето.  |
| <b>НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ</b>  |
| Възпаленият и подпухнал венец се трие леко с памучен тампон, напоен с АЛУСТАТ, а след това устата се изплаква с чиста вода. При необходимост процедурата се повтаря.  |
| <b>ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ</b>   |
| Препаратът да не се използва при пациенти, алергичникъм съставките на препарата.  |
| <b>ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ</b>  |
| Действа дразнещо на слизестата обвивка на устната кухина, кожата и очите. При евентуален контакт да се измие веднага с вода и да се потърси медицинска помощ. При случайно поглъщане на препарата да не се предизвика повръщане. Да се изпие голямо количество вода и да се потърси лекарска помощ. При работа с продукта е задължително да се използват еднократни ръкавици и защитни очила. |
| <b>СЪХРАНЕНИЕ</b>   |
| Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура под 25° С. Да се пази на място, недостъпно за деца. Срокът на годност е изписан на контейнера. След отваряне на контейнера срокът на годност не се променя ако след всяка употреба плътно се затваря.   |
| <b>ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРАЗНАТА ОПАКОВКА</b>  |
| Празните контейнери да се изхвърлят съгласно приетите разпоредби.   |
| <b>ОПАКОВКА</b>   |
| Флакон с капкомер, съдържащ 10 гр течност.  |

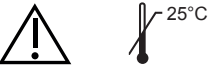


Дата на последна актуализация: 18.07.2016/2

LT

## ALUSTAT

|  |
|--|
| <span></span>  |
| Kraujavimą stabdantis skystis  |
| <b>PRIEŠ NAUDOJIMĄ BŪTINAI SUSIPAŽINKITE SU ŠIA INSTRUKCIJA</b>  |
| <b>GAMINYS SKIRTAS TIK GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ NAUDOJIMUI</b>  |
| <span></span>  |
| <b>SUDĖTIS:</b> aliuminio chloridas 25 <span> </span> %, farmakologinio grynumo vanduo, mentolis, pagalbinės medžiagos.  |
| <b>PASKIRTIS</b>   |
| Gaminys ALUSTAT taikomas stomatologinio gydymo procese ir skirtas stabdyti nežymų dantenų kraujavimą. Preparato sudėtyje esantis aliuminio chloridas sutraukia smulkius kapiliarus, dėl to sumažėja tinimas ir stabdomas nesmarkus kraujavimas.  |
| <b>NAUDOJIMO BŪDAS</b>   |
| Sutinusias ar pažeistas dantenas švelniai patepti preparatu ALUSTAT suvilgytu vatos tamponu, nuskalauti švariu vandeniu. Jei reikia, pakartoti.  |
| <b>KONTRAINDIKACIJOS</b>   |
| Negalima skirti pacientams jautriems preparato sudedamosioms dalims.   |
| <b>ATSARGUMO PRIEMONĖS</b>   |
| Dirgina burnos gleivinę, odą ir akis. Jeigu preparatas pateko į akį, tučiuojau kruopščiai nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Prarijus neskatinkite vėmimo. Gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją. Dirbant su produktu būtina naudoti vienkartinės pirštines ir apsauginius akinius. |
| <b>SAUGOJIMAS</b>  |
| Laikyti originalioje pakuotėje ne žemesnėje nei 25 <span> </span> °C temperatūroje. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Galiojimo terminas nurodytas ant pirminės pakuotės. Atidarius pakuotę galiojimo terminas nesikeičia, jei po kiekvieno naudojimo pakuotė sandariai uždaroma.          |
| <b>PRODUKTO PAKUOČIŲ TVARKYMAS</b>   |
| Panaudotas pakuotes utilizuoti arba gražinti gamintojui.   |
| <b>PAKUOTĖ</b>   |
| 10 g preparato buteliuke su lašintuvu.   |

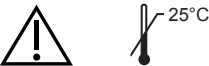

Paskutinio atnaujinimo data: 18.07.2016/2