

Дата останнього оновлення: 11.08.2020/2

CS

CHLORAXID 5,25% GEL

Přípravek k vyplachování kořenových kanálků

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: chlornan sodný (obsah aktivního chloru 5,25 %), čistěná voda, gelová báze.

URČENÍ

Během mechanického rozšiřování kanálku odstraňuje zbytky odumřelé dřeně. Čistí kanálek, včetně odstranění správné vrstvy, aby před vyplněním kořenového kanálku došlo k odhalení vyústění zubovinových kanálků. Předchází změně barvy zubů, k níž by mohlo dojít po vyplnění nevypláchnutého kanálku. Gelová konzistence přípravku minimalizuje riziko protlačení přípravku hrotovým otvorem a zajišťuje velmi dobré zpracování během aplikace. CHLORAXID 5,25% GEL doporučujeme zejména k opracování kanálků s širokými, nepravidelnými nebo poškozenými hroty.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příložený aplikátor musíte před zahájením zákroku ponořit do lihu (etanolu), a následně nasadit na stříkačku. Přípravek CHLORAXID 5,25% GEL musíte při opracování kořenového kanálku nanést přímo do něj příloženým aplikátorem nebo nanést přípravek na požadovaný nástroj. Opracujte kanálek, vypláchněte fyziologickým roztokem pomocí jehly s bočním otvorem. Proplačujte střídavě s EDTA. Postup několikrát opakujte. Přípravek je určen k opakovanému použití, aplikátor však slouží jen k jednorázovému použití. Při opakovaném použití aplikátoru hrozí riziko sekundární kontaminace.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u pacientů s přecitlivlostí na složky přípravku. **UPOZORNĚNÍ!** Během vyplachování kořenových kanálků, konkrétně mezi vyplachování chlornanem sodným a chlorhexidinem dihydrochloridem, používejte fyziologický roztok, který zabraňuje srážení hnědé usazeniny. Vydatně proplachujte.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Dbejte maximální opatrnosti během používání u perforací. Může způsobit těžké poleptání kůže a poškození očí. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhleďte lékařskou pomoc. V případě požití nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké množství vody. Vyhleďte lékařskou pomoc. Během práce s přípravkem používejte kofferdam. Používejte rukavice, ochranné brýle, ochranný oděv. V případě závažné události spojené s prostředkem je třeba ji nahlásit výrobci a příslušnému orgánu státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu při teplotě 2–8 °C (v ledničce). Chraňte proti působení slunečního záření. Používejte mimo dosah dětí. Doba použitelnosti je uvedena přímo na obalu. Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

PŘEVOZ


Výrobce povoluje přepravu výrobku po dobu delší než 10 dnů při teplotě do 40 °C. Krátkodobý převoz v uvedeném rozpětí teplot nemá vliv na bezpečnost a účinnost působení výrobku po celou dobu jeho použitelnosti.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU

Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

DOSTUPNÁ BALENÍ

Stříkačka s obsahem 2 ml přípravku, sada jednorázových aplikátorů.

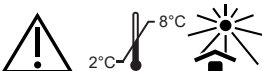

Datum poslední aktualizace: 11.08.2020/2

RU

CHLORAXID 5,25% GEL

Препарат для полоскания корневых каналов

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТОЛЬКО ВРАЧАМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

СОСТАВ: гипохлорит натрия (содержание активного хлора 5,25%), очищенная вода, гелевая основа.

НАЗНАЧЕНИЕ

Время механического расширения канала удаляет остатки мертвой пульпы. Очищает канал, в том числе с удалением смazanного слоя, чтобы раскрыть устья дентинных канальцев перед заполнением канала. Защищает зубы от дисколорации, которая могла бы произойти после заполнения непрополосканного канала. Гелевая текстура препарата позволяет свести к минимуму риск проталкивания препарата вне отверстия верушки корни и обеспечивает очень хороший контроль во время нанесения. CHLORAXID 5,25% GEL особенно рекомендуется для обработки каналов с широкими, несформированными или поврежденными верхушками.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед тем как приступить к процедуре, прилагаемый аппликатор опустить в этиловый спирт, а затем установить на шприц. Для обработки корневого канала поместите препарат CHLORAXID 5,25% GEL непосредственно в корневой канал при помощи прилагаемого аппликатора или покрыть препаратом выбранный инструмент для корневых каналов. Обработать канал, промыть физиологическим раствором с помощью иглы с боковым отверстием. Прополаскивать попеременно с EDTA. Повторить несколько раз. Препарат предназначен для многократного использования, в то время как аппликатор предназначен для однократного использования. Многократное использование аппликатора может создавать опасность вторичной инфекции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять на пациентах с повышенной чувствительностью к ингредиентам препарата. **ВНИМАНИЕ!** Во время промывания корневых каналов между промывкой гипохлоритом натрия и хлоргексидина диглюконатом применять физиологический раствор, что предотвращает образование бурого осадка. Промывать обильно.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдать особую осторожность при применении при перфорациях. Может вызывать серьезные ожоги кожи и повреждение глаз. В случае контакта немедленно промыть место контакта большим количеством воды и обратиться к врачу. В случае проглатывания не вызывать рвоту. Выпить большое количество воды. Обратиться к врачу. При работе с продуктом использовать коффердам. Применять перчатки, защитные очки, защитную одежду. В случае связанного с изделием серьезного инцидента следует известить об этом производителя и соответствующий государственный орган по месту жительства пользователя или пациента.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке при температуре 2-8 °C (в холодильнике). Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности указан на первичной упаковке. После вскрытия упаковки срок годности не изменяется при условии плотного ее закрытия после каждого использования.

ТРАНСПОРТИРОВКА


Производитель допускает транспортировку продукта в течение не более 10 дней при температуре не выше 40 °C. Кратковременная транспортировка в указанном диапазоне температур не влияет на безопасность и эффективность продукта в течение всего срока годности.

ОБРАЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАННЫМИ ЕМКОСТЯМИ

Использованные емкости следует передать для утилизации или вернуть производителю.

ИМЕЮЩИЕСЯ ЕМКОСТИ

Шприц, содержащий 2 мл препарата, комплект одноразовых аппликаторов.

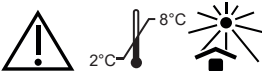

Дата последнего обновления: 11.08.2020/2

IT

CHLORAXID 5,25% GEL

Preparato per lavaggi canali

PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE ISTRUZIONE
IL PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DAI DENTISTI

COMPOSIZIONE: ipoclorito di sodio (contenuto di cloro attivo 5,25%), acqua di purezza farmaceutica, a base di gel.

APPLICAZIONE

Durante l'allargamento meccanico del canale, elimina i residui di polpa morta. Pulisce il canale, eliminando contemporaneamente lo strato untuoso per scoprire i tubuli esposti per l'otturazione. Previene la discolorazione dei denti che potrebbe apparire dopo l'otturazione del canale non lavato. La consistenza a gel del preparato, permette di minimizzare il rischio di passaggio del preparato oltre il forame apicale e garantisce un buon controllo durante l'applicazione. CHLORAXID 5,25% GEL è particolarmente raccomandato per la lavorazione dei canali con gli apici larghi, non formati o danneggiati.

MODALITÀ D'USO

Prima di iniziare il trattamento, immergere l'applicatore (contagocce) in dotazione nell'alcool (alcool etilico) e successivamente posizionarlo sulla siringa. Per lavorare il canale radicale mettere il preparato CHLORAXID 5,25% GEL direct in canale radicalar folosind aplicatorul inclus sau acoperitîi cu preparat instrumental pentru canal ales. Lavorare il canale, sciacquare con acqua fisiologica usando un ago con il foro laterale. Sciacquare alternatamente con EDTA. Ripetere l'operazione più volte. Il prodotto può essere usato più volte, invece l'applicatore è monouso. L'uso multiplo dell'applicatore può comportare il rischio di infezione retrograda.

CONTRAINDICAZIONI

Non usare il prodotto nei pazienti allergici agli ingredienti del preparato. **ATTENZIONE!** Durante il lavaggio canaleare, tra il lavaggio con l'ipoclorito di sodio ed il diglucanato di clorexidina usare la soluzione fisiologica, il che previene la formazione di un sedimento marrone. Sciacquare abbondantemente.

PRECAUZIONI

Bisogna prestare molta attenzione durante l'utilizzo nelle perforazioni. Può provocare serie ustioni alla pelle e lesioni agli occhi. In caso di contatto, sciacquare immediatamente con molta acqua e contattare un medico. In caso di inghiottimento, non provocare il vomito. Bere molta acqua. Contattare un medico. Durante il lavoro con il preparato usare il dental dam. Indossare i guanti, gli occhiali e gli indumenti di protezione. In caso di grave incidente legato al dispositivo medico, notificare l'evento al produttore e al proprietario dell'ente statale di competenza per il luogo di residenza dell'utente o del paziente.

CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale ad una temperatura di 2-8 °C (in frigo). Proteggere dai raggi solari. Conservare lontano dalla portata dei bambini. La data di scadenza si trova sulla confezione diretta. Dopo l'apertura, il prodotto non perde la scadenza a condizione che venga chiuso ermeticamente dopo ogni utilizzo.

TRASPORTO


Il produttore ammette il trasporto del prodotto per un periodo non più lungo di 10 giorni ad una temperatura non superiore ai 40 °C. Il trasporto breve nel campo di temperature indicato non influisce sulla sicurezza e sull'azione efficace del prodotto per tutto il periodo di scadenza del prodotto.

SMALTIMENTO DEL CONTENITORE

Le confezioni utilizzate devono essere affidate ad un'azienda di smaltimento o restituite al produttore.

CONFEZIONI DISPONIBILI

Siringa contenente 2 ml di preparato, set di applicatori monouso.

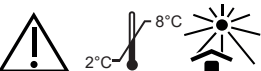

Data ultimo aggiornamento: 11.08.2020/2

RO

CHLORAXID 5,25% GEL

Produs pentru clătirea canalelor radiculare

ÎNAINTE DE UTILIZARE VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTA INSTRUCȚIUNE
PRODUS DESTINAT UZULUI DENTAR

COMPOZIȚIE: hipoclorit de sodiu (conținut de clor activ 5,25%), apă pură farmaceutică, bază de gel.

UTILIZARE

În timpul adâncirii mecanice a canalului îndepărtează resturile de pulpă moartă. Curăță canalul, îndepărtează stratul lipicios, pentru a deschide canaliculele dentinare înainte de umplerea canalului. Previne decolorarea dinților, care ar putea avea loc după umplerea canalului neclătit. Consistența de gel a produsului permite minimizarea riscului de supra-umplere cu preparat dincolo de vârful de deschidere și asigură un control foarte bun în timpul aplicării. CHLORAXID 5,25% GEL este recomandat în special pentru prelucrarea canalelor cu vârful largi, deformate sau deteriorate.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de efectuarea intervenției aplicatorul trebuie înmuiat în spirit (alcool etilic), iar apoi plasat pe seringă. În scopul de prelucrare a canalului radicalar plasați produsul CHLORAXID 5,25% GEL direct în canalul radicalar folosind aplicatorul inclus sau acoperiți cu preparat instrumental pentru canal ales. Prelucrați canalul, clățiți-l cu ser fiziologic, folosind un ac cu o deschidere laterală. Clățiți alternativ cu EDTA. Operațiunea trebuie repetată de mai multe ori. Produsul este destinat utilizării multiple, cu excepția aplicatorului, care este de unică folosință. Utilizarea multiplă a aplicatorului poate provoca riscul de reînfectare.

CONTRAINDICAȚII

Nu folosiți produsul la pacienții cu hipersensibilitate la compoziția acestuia. **ATENȚIE!** În timpul spălării canalelor radiculare, între clătirea cu hipoclorit de sodiu și digluconat de clorhexidină utilizați o soluție de ser fiziologic, care previne depunerile de culoare brună. Clățiți intens.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Fiți foarte atenți atunci când utilizați la perforații. Poate provoca arsuri grave ale pielii și leziuni oculare. În caz de contact clățiți imediat cu o cantitate mare de apă și solicitați sfatul medicului. În caz de înghițire, nu forțați voma. Consumați o cantitate mare de apă. Solicitați sfatul medicului. În timp ce se lucrează cu produsul este necesară folosirea foliei de digă. Purtați mănuși de protecție, ochelari de protecție, îmbrăcăminte de protecție. În cazul unui incident grav care implică dispozitivul, acest fapt trebuie raportat producătorului și autorității competente a Țării, în care domiciliază utilizatorul sau pacientul.

DEPOZITARE

Păstrați în ambalaje originale la o temperatură de 2-8 °C (în frigider). A se proteja de lumina solară. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Perioada de valabilitate este indicată pe ambalajul primar. După deschiderea recipientului, data de expirare nu se schimbă, dacă acesta este bine închis după fiecare utilizare.

TRANSPORT


Producătorul permite transportul produsului pentru o perioadă care nu depășește 10 zile, la o temperatură care să nu depășească 40 °C. Transportul pe termen scurt, în intervalul de temperatură specificat, nu afectează siguranța și eficacitatea produsului pe toată perioada de valabilitate a produsului.

MANIPULAREA AMBALAJULUI PRODUSULUI

Recipientele goale trebuie aruncate în mod responsabil sau returnate producătorului.

AMBALAJ DISPONIBIL

Seringă care conține 2 ml de produs, un set de aplicatoare de unică folosință.

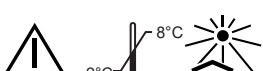

Data ultimei actualizări: 11.08.2020/2

HU

CHLORAXID 5,25% GEL

Gyökércsatorna öblítő gél

HASZNÁLAT ELŐTT OVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
KIZÁRÓLAG FOGÁSZATI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA

ÖSSZETÉTEL: nátrium-hipoklorit (aktív klórtartalma 5,25%), ioncserélt víz (Ph.Eur.), bázis gél.

JAVALLATOK

A mechanikai csatornatágításban használva eltávolítja az ottmaradt halott pulpát és egyéb szöveti maradványokat. Tisztítja a gyökércsatornát, eltávolítja a belső mérgezést, segít a csatorna dentinjének feltárásában, a gyökértömés előtt. Megelőzi a fogak elszíneződését (ha nem kellően kiöblített gyökértömők tömtek). A termék zselés állaga minimalizálja a termék csúcsnyíláson túl történő nyomásának kockázatát, és nagyon jó ellenőrzést tesz lehetővé az alkalmazás során. A CHLORAXID 5,25% GEL különösen ajánlott a széles, különleges formájú, vagy sérült csúccsal rendelkező fogcsatornák kezeléséhez.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A kezelés megkezdése előtt a mellékelt adagolt alkoholba (etil-alkoholba) kell beáztatni, majd ezt követően fel kell azt helyezni a fecskendőre. A gyökércsatorna kezelésének céljából a CHLORAXID 5,25% GEL terméket közvetlenül a gyökércsatornába kell helyezni, a mellékelt adagoló segítségével, vagy befedni a termékkel a kiválasztott csatorna eszközököt. A terméket oldalmiylású tüvel ellátott fecskendővel juttassa a gyökércsatornába, közben végezzen mechanikai tágitást. Használat után öblítse ki a gyökércsatornát fiziológiás sóoldattal. Öblítsen felváltva EDTA-val. Ismételje meg néhányszor a folyamatot. A termék többszöri használatra alkalmas, az adagoló azonban egyszeri használatra szolgá. Az adagoló többszöri felhasználása másodlagos fertőződés veszélyével jár.

ELLENJAVALLATOK

Soha ne használja olyan betegnél, aki érzékeny a termék valamely összetevőjére! **FIGYELMEZTÉS:** A gyökércsatorna kezelésekor minden nátrium-hipokloritos és klórhexidin-diglukonátos öblítés között mossa át a csatornát alaposan fiziológiás sóoldattal, ez megelőzi a barna lepedék kicsapódását. Öblítsen bőségesen.

ÖVINTÉKZÉDESEK

Perforáció esetén különös óvatossággal dolgozzon. Súlyos esegi serulest es szemkarosodast okoz. Érintkezés esetén azonnal mossa le bőséges vízzel és forduljon orvoshoz! Lenyelés esetén tilos hánytatni. Itasson a beteggel bőséges vizet és forduljon szakorvoshoz! Használata során mindig használjon kofferdam gumit, védőkesztyűt, védőszemüveget és védőruházatot. Az eszközzel kapcsolatos súlyos baleset esetén azt jelentení kell a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelybe a felhasználó vagy a beteg lakóhelye be van jelentve.

TÁROLÁS

Eredeti készelésében 2-8 °C közötti hőmérsékleten (hűtőszekrényben) tárolható. Ne tegye ki közvetlen napfénynek! Gyermekektől távol tartandó! A termék lejárati ideje a csomagoláson olvasható. Felbontás után a termék lejárati ideje nem változik, ha minden használat után légmentesen visszazárja.

SZÁLLÍTMÁNYOZÁS


A termék gyártója javasolja, hogy szállítmányozási idő nem lehet több mint 10 nap, 40 °C alatti hőmérséklet mellett. Rövid távú szállítás a fenti hőmérséklet korlát betartásával nem befolyásolja a termék hatékonyságát annak teljes élettartama alatt.

AZ ELHASZNÁLT TERMÉK LESELEJTÉZÉSE

Az elhasznált terméket, illetve a csomagolóanyagot juttassa vissza a gyártóhoz, vagy selejtezze le a helyi hatóságok előírásának megfelelően.

KISZERELÉS

2 ml készítményt tartalmazó fecskendő, eldobható adagolókkal.

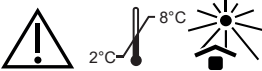

Utolsó frissítés dátuma: 11.08.2020/2

BG

CHLORAXID 5,25% GEL

Препарат за изплакване на каналите на корените

ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ
ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ЕДИНСТВЕНО ОТ СТОМАТОЛОГ

СЪСТАВ: натриев хипохлорит (съдържание на активен хлор 5,25%), пречистена вода, гел база.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

По време на механичното разширяване на канала се отстраняват остатъците от мъртвата пулпа. Почиства канала, като отстранява и мекия слой, за да се отворят зъбните каналчета преди запълването им. Предотвратява оцветяването на зъбите, което би могло да настъпи след запълването на неизплакнати канали. Гел консистенцията на препарата позволява да се минимализира опасността той да се разпръсне извън апикалния отвор и осигурява много добър контрол по време на нанасянето. CHLORAXID 5,25% GEL се препоръчва изключително за обработка на канали с широки, неформени или увредени върхове.

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Преди пристъпване към процедурата потопете добавения аппликатор в спирт (етилов алкохол), а след това го поставете на спринцовката. За да обработите канала на корена, сложете от препарата CHLORAXID 5,25% GEL непосредствено в канала с помощта на добавения аппликатор или покрийте с препарат избораия уред за обработка на канали. Обработвайте канала, изплакнете с физиологичен разтвор с помощта на игла със страничен отвор. Плакнете, като сменяте с EDTA. Неколкократно повторете тази дейност. Продуктът е предназначен за многократна употреба, а аппликаторът е за еднократна употреба. Многократното използване на аппликатора носи риск от вторична инфекция.

ПРОТИВОПОКАЗАЦИИ

Препаратът да не се използва при пациенти, алергични към съставките на препарата. **ВНИМАНИЕ!** По време на изплакване на кореновите канали, между плакненето с натриев хипохлорид и с хлорхексидин диглюконат да се прилага физиологичен разтвор, който предпазва от появата на кафяви напели. Плакнете обилно.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Запазете особено внимание по време на прилагане при перфорации. Може да предизвика сериозно изгаряне на кожата и увреждане на очите. При евентуален контакт да се измие веднага с вода и да се потърси медицинска помощ. При случайно поглъщане на препарата да не се предизвика повърхана. Да се изпие голямо количество вода и да се потърси лекарска помощ. Незабавно потърсете медицинска помощ. При работа с продукта използването на кофердам е задължително. Използвайте ръкавици, предпазни очила, както и предпазно облекло. При сериозен инцидент, свързан с изделието, трябва да се уведоми производителя и съответния орган по местожителство на потребителя или пациента.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура 2-8 °C (в хладилник). Пазете от слънчева светлина. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Срокът на годност се намира на самата опаковка. След отваряне на опаковката срокът на годност не се променя, при условие че при всяко ползване тя се затваря плътно.

ТРАНСПОРТИРАНЕ


Производителят допуска транспортиране на препарата, не по-дълго от 10 дни при температура до 40 °C. Краткия транспорт в подадения температурен интервал не влияе на сигурността и ефективността на действие на препарата през цялва период в срока на годност.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРАЗНАТА ОПАКОВКА

Празните опаковки да се изхвърлят съгласно приетите разпоредби.

ОПАКОВКА

Спринцовка, съдържаща 2 мл препарат, комплект аппикатори за еднократна употреба.

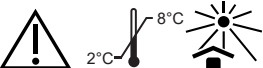

Дата на последна актуализация: 11.08.2020/2

LT

CHLORAXID 5,25% GEL

Preparatas šaknų kanalų plovimui

PRIEŠ NAUDOJIMĄ BŪTINAI SUSIPAŽINKITE SU ŠIA INSTRUKCIJA
GAMINYS SKIRTAS TIK GYDYTOJŲ STOMATOLOGŲ NAUDOJIMUI

SUDĖTIS: natrio hipochloridas (aktyvus chloro kiekis 5,25%), farmacinės švaros vanduo, gelinė bazė.

PASKIRTIS

Mechaninio kanalų platinimo metu šalina apmirusios pulpos liekanas. Išvalo kanalą, šalina neteplų sluoksnį, taip atidengiant kanalukų angas prieš užpildymą. Apsaugo nuo danties spalvos pokyčio dėl neišplauto kanalo užpildymo. Preparato gelio konsistencija minimalizuoja jo perpildymą per viršūnės angą ir užtikrina labai gerą kontrolę naudojimo metu.

CHLORAXID 5,25% GEL rekomenduojamas ypač gydant kanalus su plačiomis, nesuformuotomis arba sugedusiomis viršūnėmis.

NAUDOJIMO BŪDAS

Prieš pradėdant procedūrą reikia pridėti aplikatorių panardinti spirite (etilo alkoholi), po to patalpinti švirkšte. Prieš šaknies kanalo gydymą CHLORAXID 5,25% GEL preparatą patalpinti betarpiškai šaknies kanale su aplikatoriaus pagalba arba patepti preparatu kanalo gydymo įrankį. Baigus kanalo gydymo procedūrą, praplauti fiziologiniu tirpalu adatos su šonine anga pagalba. Plauti pakaitomis su EDTA. Veiksmą pakartoti kelis kartus. Gaminys yra skirtas daugkartiniam panaudojimui, tačiau aplikatorių galima panaudoti tik vieną kartą. Daugkartinis aplikatoriaus naudojimas gali priversti prie pakartotinės infekcijos.

KONTRAINDIKACIJOS

Negalima skirti pacientams jautriems preparato sudedamosioms dalims. **DĖMESIO!** Kanalų plovimo metu, tarp skalavimų natrio hipochloritu ir chlorhекsidino diglукonatu naudokite fiziologinį tirpalą, kuris padės išvengti rudų nuosėdų susiformavimo. Gausiai išskalaukite.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Laikykitės specialų atsargumo priemonių perforavimo metu. Gali smarkiai nudeginti odą ir pažeisti akis. Jeigu preparatas pateko į akį, tučiuojau kruopščiai nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Prarijus neverskite vėmimo. Gerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją. Dirbdami su preparatu naudokite koferdamą. Naudokite pirštines, apsauginius akinius ir drabužius.

Įvykus rimtam, su gaminio susijusiam incidentui, turėtų būti apie tai pranešta gamintojui ir Šalies, kurioje gyvena vartotojas ar pacientas, kompetentingai institucijai.