

RUBBER-DAM cord

Gumka zaciskowa do koferdamu



PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ
WYRÓB PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

ZASTOSOWANIE

W celu ustabilizowania koferdamu umieścić gumkę w przestrzeni międzyzębowej pomiędzy zębem odsonionym, a zębem zabezpieczonym koferdamem.

Do ustabilizowania koferdamu wystarczy gumka o długości około 4 cm. Po zakotwiczeniu długość gumki może być dostosowana do potrzeb, poprzez odcięcie nożyczkami.

Użycie lubrykantu rozpuszczalnego w wodzie, ułatwi zamocowanie gumki w przestrzeni międzyzębowej.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze do 25 °C.

Chronić przed promieniowaniem słonecznym.

Szczelnie zamknąć po użyciu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim.

OSTRZEŻENIA

Produkt zawiera latex, co może wywoływać reakcję uczuleniową.


POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIAM I PO WYROBIE

Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub zwrócić do wytwórcy.

ZAWARTOŚĆ

Dozownik zawierający 1,2 m gumki.

Dostępne warianty grubości: cienka, średnia i gruba.

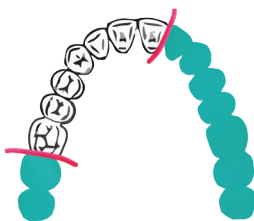

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85