

INSTRUKCJA UŻYCIA WYROBU

**PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ
WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA****SKŁAD:** propan-butan, aromat pomarańczowy, alkohol.**PRZEZNACZENIE**

Spray do badania żywotności miazgi o zapachu pomarańczowym.

SPOSÓB UŻYCIA

Precyzyjnie i kilkakrotnie spryskać docelową powierzchnię z odległości kilku centymetrów przez czas 1-3 sekundy.
Uwaga: bezpośredni kontakt z płynną zawartością puszkii poprzez zachłapanie lub spryskiwanie może spowodować odmrożenia powierzchni skóry i jamy ustnej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Zawiera (R)-p-menta-1,8-dien. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Skroplony gaz w stanie zamarznięcia. Kontakt z produktem może powodować oparzenia zimnem względnie zmarznięcia. Aż do całkowitego wyparowania łatwopalnych składników występuje także po użyciu niebezpieczeństwo tworzenia się wybuchowych mieszanin pary i powietrza.
Nie stosować u pacjentów z alergią na którykolwiek składnik preparatu. W przypadku wystąpienia poważnego incydentu związanego z wyrobem należy ten fakt zgłosić producentowi i właściwemu organowi Państwa, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT


Chronić przed mrozem i wilgocią.
Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
W przypadku niedostatecznej wentylacji i/lub podczas użytkowania, mogą powstać wybuchowe/wysocje łatwopalne mieszaniny.
Wilgotność względna powinna wynosić poniżej 60%.
Chronić przed temperaturą powyżej 35°C/95°F.
Chronić przed otwartym ogniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Trzymać z dala od ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
Chronić przed zgnieceniem.
Nie wolno składować całych palet, chyba że wyraźnie na to zezwalamy.
Przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
Chronić przed silnymi wahaniami temperatur, np. w kontenerze.
Chronić przed wysoką wilgotnością i agresywnym powietrzem, np. morskim.
Idealna temperatura transportu i przechowywania wynosi od 15°C/59°F do 25°C/77°F.
Nie palić w pobliżu.
Towar musi być zabezpieczony na czas transportu, aby zapobiec poślizgnięciu się i przewróceniu.

OPAKOWANIE

Spray 200 ml.

Termin przydatności do użycia i numer LOT znajdują się na opakowaniu bezpośrednim.



 Friedrich Huber aeronova GmbH & Co.
Sobrigauer Weg 4, 01257 Dresden
Germany

 PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Poland
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel./fax: + 48 15 842 35 85
www.cerkamed.com



3e 270 MD 

WYRÓB ZAREJESTROWANY POD NAZWĄ DENTAL-KALTESPRAY ORANGE

Data ostatniej aktualizacji: 13.08.2021/3

INSTRUCTION FOR USE

**BEFORE USE PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY
PRODUCT FOR DENTAL USE ONLY****COMPOSITION:** propane-butane, orange scent, alcohol.**INTENDED USE**

Spray for pulp vitality testing with orange scent.

INSTRUCTIONS FOR USE

Apply the product by spraying the target surface precisely and several times, from a distance of a few centimeters. Usually, a spraying time of 1-3 seconds is sufficient.

Attention: the direct contact with the liquid contents of the can through splashes or spray jets can cause frostbite on the surface of the skin and in the oral cavity.

PRECAUTIONS

Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Contains (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene. May produce an allergic reaction. Refrigerated liquefied gas. Contact with the product can cause cold burns or frostbite. Even after use and until complete evaporation of the flammable components, there is still a danger of an explosive steam-air mixture forming.

Do not use if the person in treatment is allergic to any of the ingredients.

Any serious incident involving the product should be reported to the manufacturer and the competent authority of the State in which the user or patient is domiciled.

STORAGE AND TRANSPORT

Protect from frost, humidity and wetness.

Store in a cool, well-ventilated area.

In case of insufficient ventilation and/or through use, explosive/highly flammable mixtures may develop.

The relative humidity should be below 60%.

Protect from temperatures above 35°C/95°F.

Protect from open flames and direct sunlight.

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources.

Protect from crushing and squeezing.

It is not allowed to stack complete pallets unless we have explicitly allowed it.

Store in a secured place and keep out of reach of children.

Protect from highly fluctuating temperatures, like e. g. in a sea container.

Protect from high humidity and aggressive air, like e. g. sea air.

The ideal temperature for transport and storage is between 15°C/59°F and 25°C/77°F

Do not smoke nearby.


The goods have to be safely secured during transport to prevent slipping and falling over.


PACKAGING:

Spray 200 ml.

Expiry date and LOT number are placed on the main container.



 Friedrich Huber aeronova GmbH & Co.
Sobrigauer Weg 4, 01257 Dresden
Germany

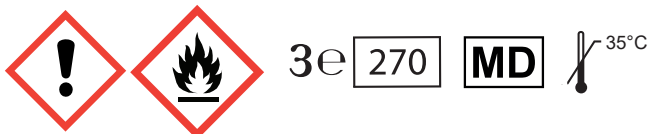

 **PPH CERKAMED** Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Poland
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel./fax: + 48 15 842 35 85
www.cerkamed.com

DEVICE REGISTERED UNDER THE NAME: DENTAL-KALTESPRAY ORANGE

Last update: 13.08.2021/3